


MOBILE α (モバイルアルファ) 簡単取扱説明書

(各部名称)

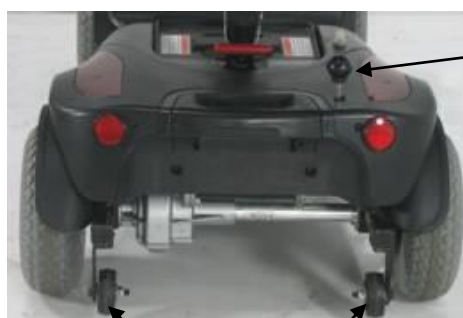


転倒防止車輪

フリーホイールレバー
レバーを引くと手押しが可能



(操作パネル)

1. 速度調節ダイヤル
2. クラクションボタン
3. バッテリメーター
4. 電源キー
5. ヘッドライトスイッチ

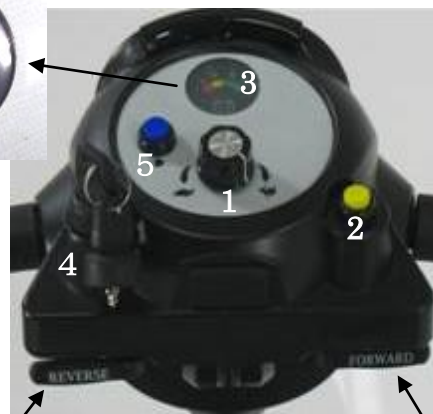

アクセルレバー後進

アクセルレバー前進

(操作方法)

■ 電源スイッチ（メインキー操作）

- ◆ 電源を入れるときはキーを差込み、時計回しに回しますと電源ランプが点灯します。
- ◆ 電源を切るときはキーを反時計回りに回しますと、電源ランプは消えますので必要に応じてキーを抜いてください。

■ 速度調節ダイヤル（ウサギとカメ）

スピードダイヤルを回してスクーターの最高速度を設定します。時計回り（うさぎマーク側）に回す程、早い速度設定（～6 km/h）になります。反時計回り（かめマーク側）に回しますと遅い速度設定（～0 km/h）ができます。

■ 移動と停止

- ◆ 右側の速度調整レバーを右親指で前に押すと前進します。
- ◆ 左側の速度調整レバーを左親指で前に押すとバックします。
- ◆ ブレーキを掛けるときは速度調整レバーを放します。レバーがニュートラルに戻り、自動的に電磁ブレーキが掛かり車体が停止します。
- ◆ 速度調整レバーの押し加減（前に押す程早く走ります）により速度調整（設定速度内）が出来ます。

■ クラクションボタン

ボタンを押すとクラクションが鳴ります。ボタンを離すと音が止まります。

■ ブレーキ

車体には電磁ブレーキが装備され、速度調整レバーを離すと自動的に電磁ブレーキが掛かり車体が止まります。

■ ヘッドライト

ボタンを押す事で点灯し、再度押すと消灯します。ヘッドライトは高電力を消費し走行距離に影響しますので消し忘れにご注意ください。

■ 充電とバッテリー

- ◆メーターの位置が緑色の状態で走行ください。ご利用後は速やかに充電を行ってください。
- ◆充電時間は状況によって異なりますがフル充電の場合 6～8 時間くらいです。
- ◆充電時は本体に充電端子を挿入し最後にコンセントへ差込んでください。
- ◆満充電完了後は速やかにコンセントを抜いてください。（※充電器本体ランプが緑色）
- ◆バッテリー保護のため長期間ご使用にならない場合でも1カ月に1度くらいの充電をお勧めします。

※走行距離はバッテリーが新品の場合で約 10k mです。（冬季と真夏季は半減する場合があります）
バッテリーパックは着脱式ですのでスペアバッテリーをご利用いただけますと便利です。